



不必再寻找更舒适的了，就享受它吧！



1A200老年人专用脚

因为我们不想让脚步被绊住，
宝泰欧设计出独一无二假脚，
用于活动水平较低的截肢者。



老年人专用脚 GERY 目标是为活动水平非常低的老年人提供他们需要的舒适感并确保：

- 极大舒适性 专利的设计减少了残肢的压力疼痛
- 重量轻 由于EVA结构
- 易于行走 归功于脚板芯的形状。尤其建议老年人安装使用




1A200 老年人专用脚

最大承重 125公斤



专利

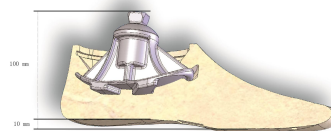

四棱台连接件与脚板一体化结构
其本身带连接罩，用胶与海绵粘住即可。

型号	左右	尺寸 (厘米)	材料	最大承重
1A200	左/右	22-27	EVA	100公斤
1A200	左/右	28-29	EVA	125公斤



产品型号1A200-G26：老年人专用脚、左侧、26号

25号脚板重量（包括踝关节）：395克 = 比S.A.C.H.

脚轻约30%

- 帮助老年人行走，增加户外行走距离
- 跟高为5-20公分
- 密封的EVA脚套易于清洗且不易弄脏

两条腿之间的角度/
足跟触地时侧承重线

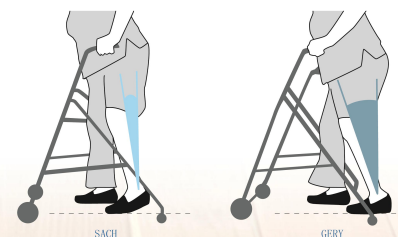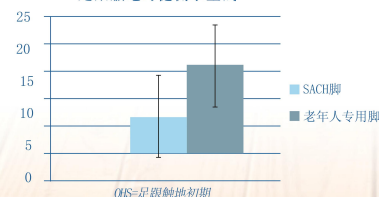

当穿戴老年人专用脚行走或移动时，不需要足跟抬起就能非常容易地背屈，从而增大了两条腿之间的角度。



YOUR ROAD
COMPANION
伴您同行



宝泰欧(北京)假肢矫形器商业有限责任公司
北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼一层 邮编：100024
电话：(0) 10 52037101 传真：(0) 10 52037102
Http://www.proteor.com.cn

