



DynaStar


内外翻功能碳纤储能脚

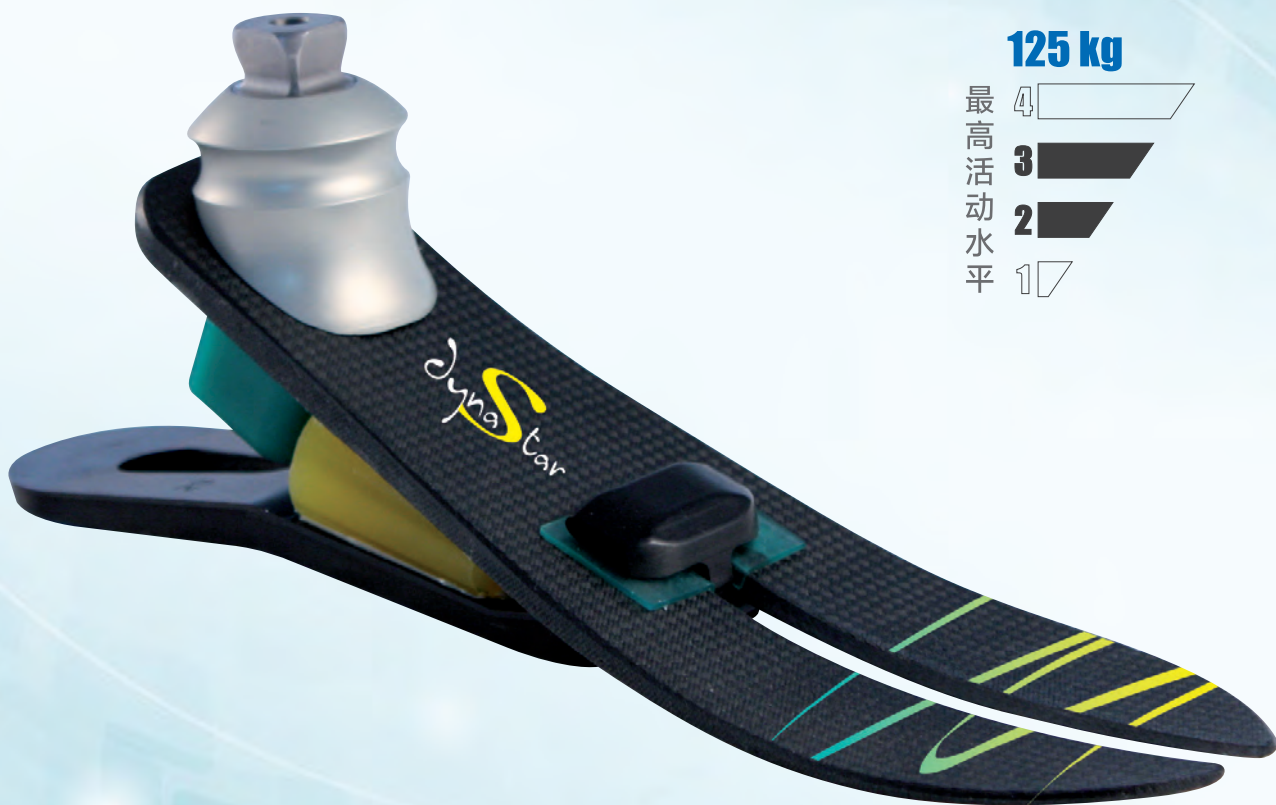

125 kg

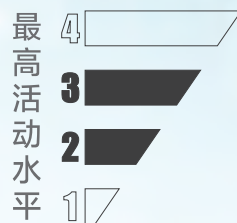

1A500 | 舒适型碳纤储能脚

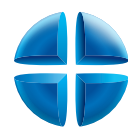

宝泰欧
PROTEOR


以人为本

1A500 | 舒适型碳纤储能脚

碳纤舒适型脚板为无论生活在城市或农村活动水平中等的截肢者提供舒适的日常生活。

结构设计：

- 连接脚板上下两部分的PU轴使足跟部分非常舒服
- 通过硬性底板传递能量
- 复合碳纤维释放能量

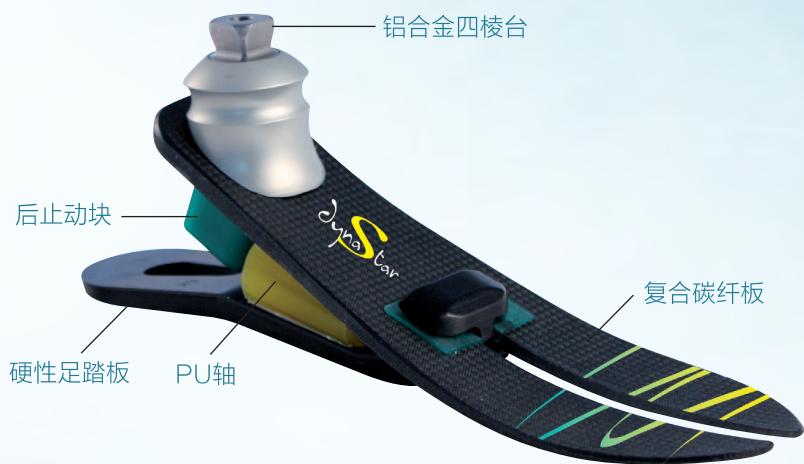

- ◆ 专门为功能级2、3的截肢者设计的储能脚
- ◆ 使用者体重范围：45至125公斤
- ◆ 脚板尺寸：22至29厘米
- ◆ 跟高范围：0至20毫米
- ◆ 专利原创设计
- ◆ 连接足底板和龙骨的PU块提高了行走时的舒适度
- ◆ 足跟触地时具有舒适的减震性
- ◆ 独特的PU块吸收脚板轻微的外侧移动和内侧旋转，同时抵消接受腔内对残肢的摩擦和压力
- ◆ 碳纤复合龙骨的分叉设计和PU块骨使内外翻成为现实
- ◆ 硬性足底板在足跟触地时传递承重能量，使步伐更轻松
- ◆ 较低的结构高度（10厘米）更适用于长残肢患者

产品型号	硬度	左右	尺寸（厘米）
1A500	2到5	-G/D	22-29

脚板产品型号示例：1A500-3G26

硬度：3级、左侧

尺寸：26厘米

脚板重量：345克



1A60020-脚板套

独立的脚板套带有一只保护袜和用来与装饰海绵连接的踝罩

1A500-CH2019-JAN



宝泰欧（北京）假肢矫形器商业有限责任公司
 北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼一层 邮编：100024
 电话：010 65476760 传真：010 65476769
<http://www.proteor.com.cn>

