



崎岖的道路任你前行

产品型号	硬度	左/右	尺寸(厘米)	整体高度(厘米)	结构高度(厘米)
1A600 - *	1—4级	G / D	22—25	170	154
1A600 - *	1—6级	G / D	26—30	180	164

型号示范: 硬度3级、右侧、25号 = 1A600-3D25
25号脚板重量约: 400克(不含脚套)
G=左/ D=右

根据截肢者体重和活动水平选择脚板硬度


体重/活动水平	45 — 59 公斤	60 — 74 公斤	75 — 89 公斤	90 — 104 公斤	105 — 124 公斤	125 — 150 公斤
正常	1	2	3	4	5	6
较高	2	3	4	5	6	-

根据脚板尺寸选择硬度

尺寸(厘米) /硬度	1	2	3	4	5	6
22	•	•	•	•		
23	•	•	•	•		
24	•	•	•	•		
25	•	•	•	•		
26	•	•	•	•	•	•
27	•	•	•	•	•	•
28	•	•	•	•	•	•
29	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•



脚板套包含踝罩和保护袜。

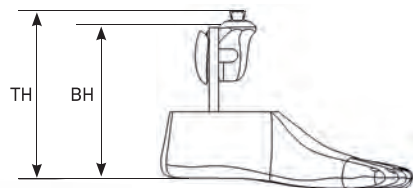

DynaTREK

1A600 高效滚动型碳纤储能脚



各种崎岖的道路
都无法阻止前行的脚步



更多的信息与视频请登录:
www.proteor.com 或 www.proteor.com.cn

宝泰欧(北京)假肢矫形器商业有限责任公司
地址: 北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层
电话/传真: 010-65476760 / 65476769
网址: www.proteor.com.cn

宝泰欧
PROTEOR

DYNATREK-CH20180531


1A600

dynaTREK 高效滚动型碳纤储能脚，能够在**各种路面**无忧无虑地行走。

分叉碳纤板具有内/外翻功能及最佳储能效果。

dynaTREK 是一款专为活动水平较高患者而设计，能够流畅、安全地行走
在各种路面（石子路、混凝土石、岩石、沙地、鹅卵石、
草坪…），以及坡路和楼梯。

150 公斤

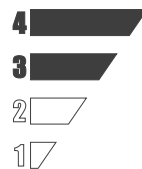

1A600



足跟楔块

- 活动水平较高的截肢者；
- 适用于大腿和小腿假肢装配；
- 轻松地行走各种路面；
- 流畅地向前滚动；
- 配有用于调节硬度的足跟楔块；
- 最大承重：150公斤；
- 防水、防盐水、防氯水；
- 脚板套为聚胺脂材料。

脚板滚动
使用者测试
弹性

对使用者测试表明，与他们通常使用的脚板相比在以下方面满意度整体提高：

- 行走轻松
- 前-后具有弹性
- 侧向稳定

2017年，对穿戴1A600碳纤脚患者进行为期5周的测试结论。

dynaTREK

行走各种崎岖的道路上

