


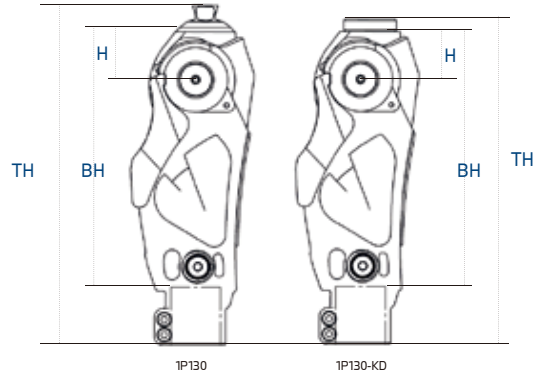

技术参数

产品编号	1P130	1P130-KD
重量	1265 g	1285 g
TH/BH/H(毫米)	232/177/36	222/174/33
材料	航空铝合金、不锈钢、钛合金	
最大屈曲角度	120 °	
近端连接件	四棱台	螺纹
末端连接件	Ø 34 mm 腿管	
最大承重	150 kg / 330 lbs	
活动水平	3-4	
防水	防溅、淋	

建议配套脚板

真空成型连接件	1K179	1K179
管接头	1K183•1K207-HD 1D41-HD•1K190	1K207-HD 1D41-HD•1K190
腿管	1G01-HD	1G01-HD
	1A500 舒适型碳纤储能脚	
	1A600 冲击型高效滚动型储能脚	
	1A400 C型运动碳纤储能脚	



hyTREK

单轴液压锁 膝关节



更多的信息与视频在
www.proteor.com.cn

宝泰欧（北京）假肢矫形器商业有限责任公司

地址：北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层

电话：010-5203 7101

传真：010-5203 7102


网址：www.proteor.com.cn



hyTREK 1P130 是一款由液压控制支撑期和摆动期并具有手动锁功能的单轴膝关节。

- 专为中高活动水平患者设计的高端液压膝关节。
- 使患者能够适应日常生活中所有的路况, 包括交替下楼梯、走斜坡。
- 强有力的制动系统为患者提供安全保障。单轴结构提供最自然的步态。

150 kg / 330 lbs

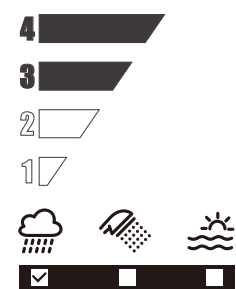

1P130

- 活动水平较高的截肢者
- 轻松地行走在各种路面
- 强大的液压制动系统
- 具有手动锁功能
- 最大承重: **150公斤**
- 膝关节可以在任意角度锁定
- 防水功能 (淋、溅水)

• S: 液压锁灵敏度调节

• R: 液压锁制动力量调节

手动锁定按钮

• F: 屈曲阻尼调节

• E: 末期伸展阻尼调节



包括调整扳手

hyTREK
天涯海角任你行走



单轴

最大屈曲角度120°

液压缸

手动锁



MADE IN FRANCE