

## 关注并解决截肢者的困难

福瑞达产品的每次创新都旨在和患者、医生以及假肢技师共同合作，开发出优秀的假肢产品。这些创新和解决方案包括技术创新、服务、培训、教育资源和咨询支持，共同来确保用户的满意。

## 技术参数

脚板尺寸：22-31厘米  
 人字分趾可选：22-28厘米  
 结构高度：143毫米-172毫米  
 产品重量：553-772克  
 最大承重：166公斤  
 级别：1-9  
 是否分趾：是  
 跟高：10毫米  
 保修：脚板36个月，脚套6个月



## 可进行的活动

低活动水平	中等活动水平
散步	轻慢跑
园艺	打网球
购物	徒步旅行
打高尔夫球	跳舞
骑自行车	滑冰
捕鱼	
露营	

## 级别选择

体重（公斤）	低活动水平	中等活动水平
41-52	1	1
53-59	1	2
60-68	2	3
69-77	3	4
78-88	4	5
89-100	5	6
101-116	6	7
117-125	7	8
131-147	8	9
148-166	9	

## 与我们联系

宝泰欧（北京）假肢矫形器商业有限责任公司

地址：北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层

电话：010 6547 6760

传真：010 6547 6769

网址：www.proteor.com.cn



FREEDOM  
Agilix

最大化  
减振效果



## FREEDOM Agilix


阿吉力多轴减震碳纤储能脚，专为避免承重冲击、减少接受腔剪切力，提高各种地形下行走舒适度而设计。重量超轻的设计为用户提供无可比拟的舒适性能

# 最大化的 减震效果

### 目标用户

K<sub>3</sub>

- K3活动等级的截肢者，冲击力高、中高活动量的用户特别优化了垂直减震效果和碳纤弹性，提升了整体舒适度。
- 需要长时间行走的截肢者。
- 喜欢偏软，滚动流畅的截肢者。

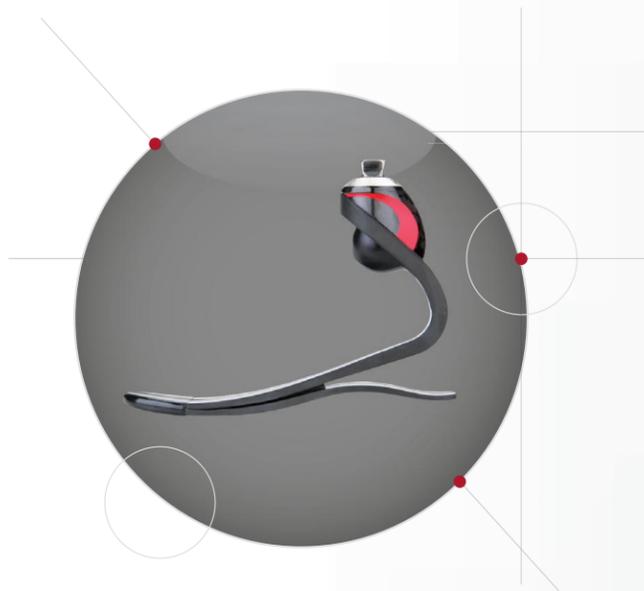

垂直减震和碳纤的柔性针对K1-K3活动水平截肢进行了优化，并提高了整体舒适度

全长动态足跟碳板保证流畅无缝的滚动，以获得优越的舒适度和更对称的步态

更低的外形轮廓设计，使阿吉利重量更轻，可以实现更多的活动，而更不易疲劳



多轴功能增强了地形适应力和稳定性，流线分趾设计带来了耐久性的提升

