
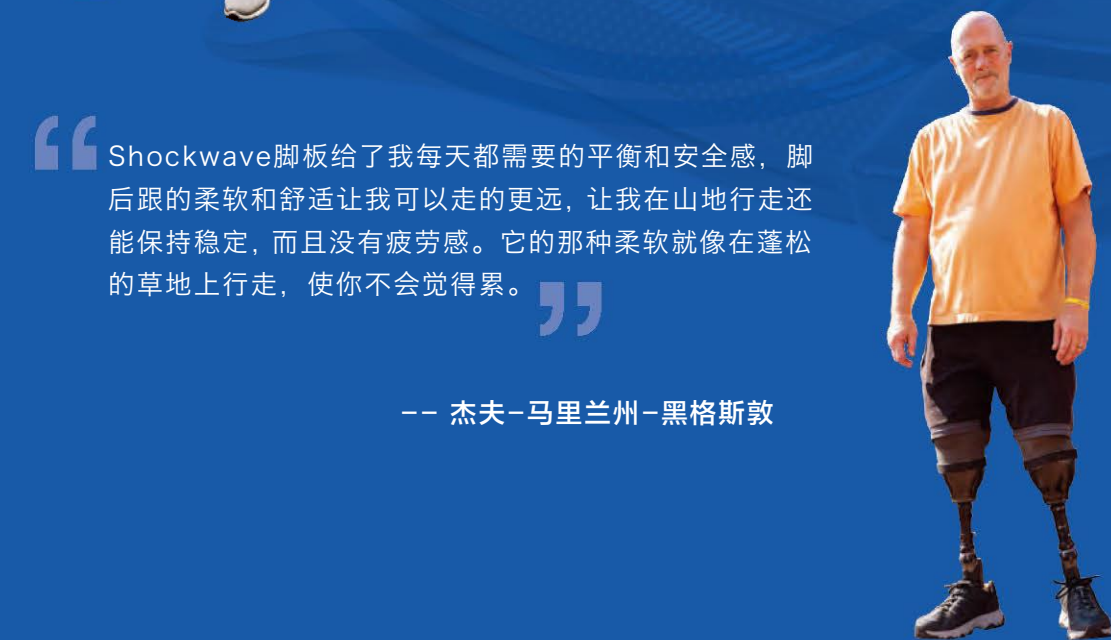
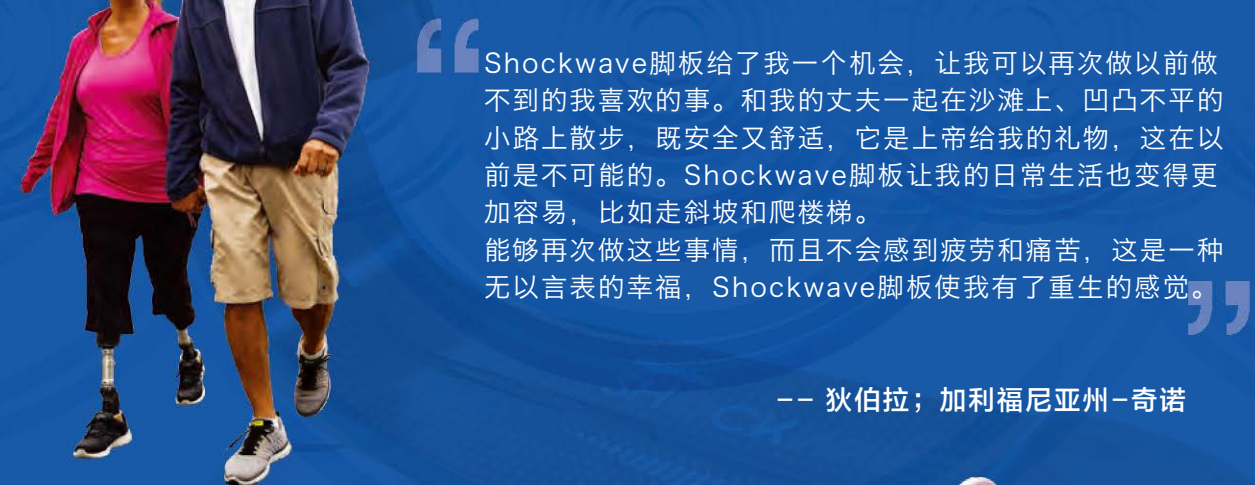


Human First

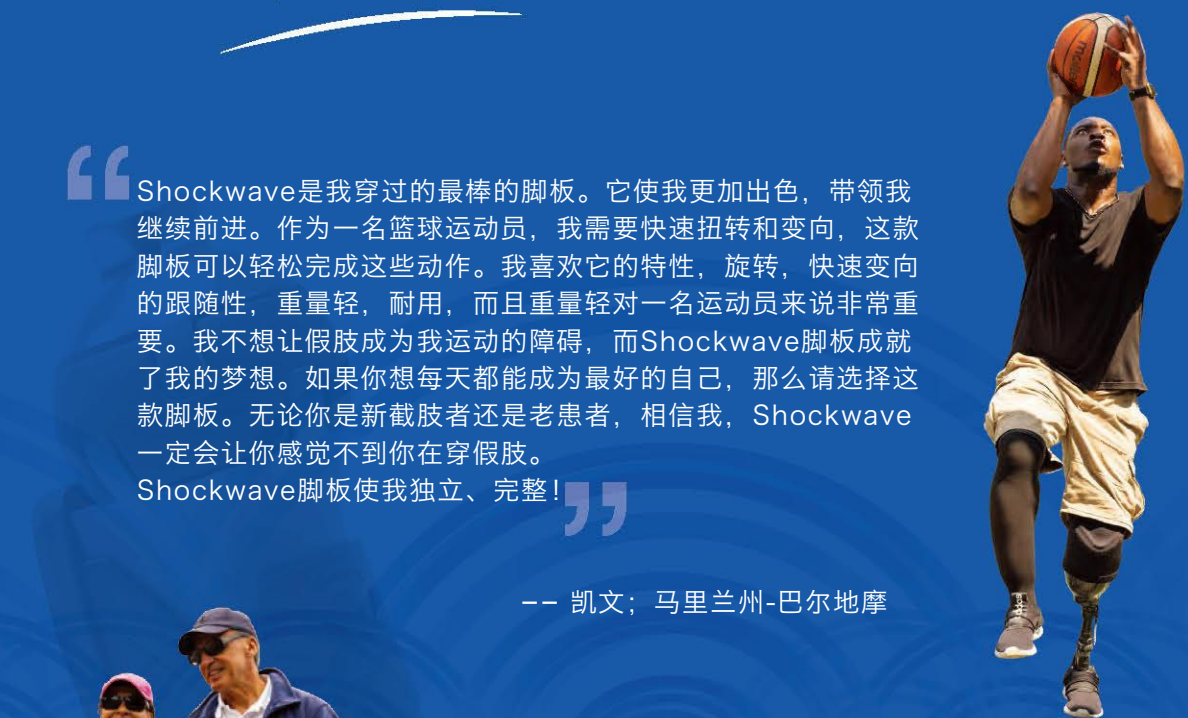

“ Shockwave是我穿过的最棒的脚板。它使我更加出色，带领我继续前进。作为一名篮球运动员，我需要快速扭转和变向，这款脚板可以轻松完成这些动作。我喜欢它的特性，旋转，快速变向的跟随性，重量轻，耐用，而且重量轻对一名运动员来说非常重要。我不想让假肢成为我运动的障碍，而Shockwave脚板成就了我的梦想。如果你想每天都能成为最好的自己，那么请选择这款脚板。无论你是新截肢者还是老患者，相信我， Shockwave一定会让你感觉不到你在穿假肢。
Shockwave脚板使我独立、完整！”

-- 凯文；马里兰州-巴尔地摩

“ Shockwave脚板给了我一个机会，让我可以再次做以前做不到的我喜欢的事。和我的丈夫一起在沙滩上、凹凸不平的小路上散步，既安全又舒适，它是上帝给我的礼物，这在以前是不可能的。Shockwave脚板让我的日常生活也变得更加容易，比如走斜坡和爬楼梯。能够再次做这些事情，而且不会感到疲劳和痛苦，这是一种无以言表的幸福， Shockwave脚板使我有重生的感觉。”

-- 狄伯拉；加利福尼亚州-奇诺

“ Shockwave脚板给了我每天都需要的平衡和安全感，脚后跟的柔软和舒适让我可以走的更远，让我在山地行走还能保持稳定，而且没有疲劳感。它的那种柔软就像在蓬松的草地上行走，使你不会觉得累。”

-- 杰夫-马里兰州-黑格斯敦

订购简易

① 结构高度/重量



尺寸 (cm)	结构高度 (mm)	重量 (g)
23 - 25	175	917
26 - 28	186	998
29 - 30	198	1154

② 级别选择

体重 (KG)	活动水平		
	低	中	高
44-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-130	7	8	
131-147	8		

* 结构高度和重量是基于23、26、29号，4级脚板（包含脚套和消音袜）测量得出的，会因级别和制造工艺的不同有正常范围的误差。

③ 完整的脚板编号

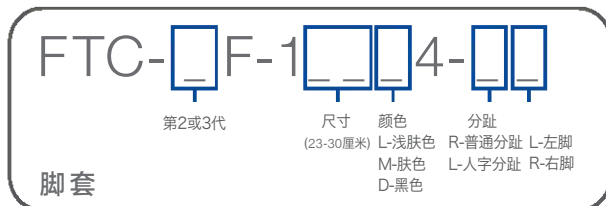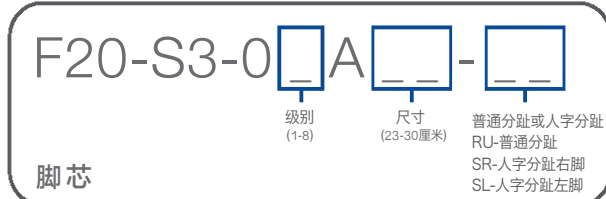

23-28CM的脚板可选人字分趾
所有脚套都有浅色、肤色、深色可供选择

配件

- 鞋拔子（ACC-00-103）
- 黑色或白色消音袜（SO-NPS-XXXXX-00）
 - 23-25 cm: 12"
 - 26-28 cm: 14"
 - 29-30 cm: 16"

注：消音袜和足跟缓冲块都包含在订购的脚板内。



宝泰欧（北京）假肢矫形器商业有限责任公司
地址：北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层
电话：010 6547 6760
传真：010 6547 6769
网址：www.proteor.com.cn



FREEDOM
SHOCKWAVE™

震撼
SHOCKING

缓冲
ABSORPTION

强效
MOMENTUM

轻盈
LIGHTNESS



L5987 + L5984

FREEDOM
SHOCKWAVE™



- SHOCKWAVE 脚板包含了一个球形减震装置 (SSU)，因此成为行业领先的经典设计。
- 独特的EnduraCore®复合材料制成使其具有超强的耐久性。
- 球形减震装置 (SSU) 提供垂直减震和轴向旋转，为K3/K4的高活动水平患者带来令人震惊的自然和舒适体验。

SHOCKING 震撼
ABSORPTION 缓冲
轻盈 LIGHTNESS
MOMENTUM 强效

- 减少对残肢的冲击力，以实现更自然的步态
- 降低接受腔压力，提高舒适度
- 增加了稳定性的同时具备快速旋转的扭力
- 重量轻，外形纤薄，易于适配



球形减震装置 (SSU)

- 脚跟触地时提供强有力的垂直减震，可以缓解脚板对残肢的冲击力，实现更自然的步态。
- $\pm 15^\circ$ 度的轴向旋转可最大限度地降低接受腔对残肢的压力，使患者在正常行走和快速运动过程中无缝衔接。

(EnduraCore) 技术

独特的碳纤维和玻璃纤维叠层提供了理想的耐用性、灵活性和强度，提供了高能量反馈；有效的缓解疲劳感，从而达到最佳步态。

分叉设计的龙骨和足底板

内/外翻功能与SSU的轴向旋转协调工作，提高了在不同地形上的稳定性、舒适性和患者的自信心。

全长的足底碳板和龙骨

足跟触地时碳板发生形变，最大限度地提供了能量反馈；具有卓越的地面顺应能力，在任何地形下都可以做到滚动流畅、步态自然。

全脚板无螺栓设计

消除了滚动死角和薄弱的结构区域，使脚板更加可靠和轻盈。



人字分趾

23-28厘米的脚板可选择人字分趾。