

塞莱

使你具有平滑、灵活的步态

- 脚板上部的的设计增加了碳板的长度，使碳板一直延伸到脚板顶部，以储存和释放更多的能量，并提供了平滑的步态
- 分体式龙骨设计提供了极好的内/外翻功能
- 全长足跟碳板提供了更多的能量返还和支撑的稳定基础，使步态更加稳定
- 最大承重可达166公斤
- 36个月的保修期（脚套6个月）





每一天

产品型号: FS1

尺寸: 22-31厘米

22-28厘米 可提供人字分趾

最大承重: 166公斤

跟高: 10毫米


保修: 脚板36个月

(脚套6个月)

结构高度与重量

| 尺寸 (厘米) | 结构高度 (毫米) | 重量 (克) |
|---------|-----------|--------|
| 22-25 | 146 | 515 |
| 26-28 | 172 | 640 |
| 29-31 | 187 | 750 |

产品重量包括脚套

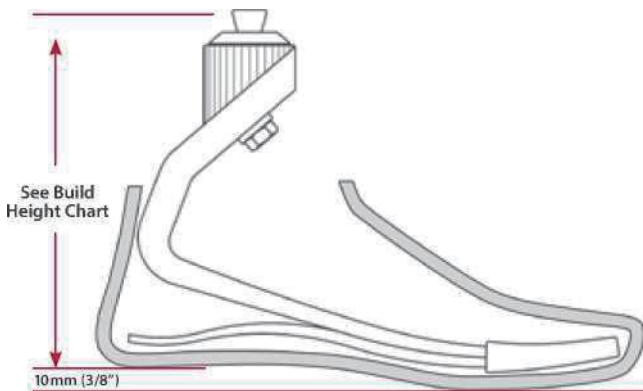

级别选择

| 体重 (公斤) | 活动水平与对应级别 | | |
|---------|-----------|----|---|
| | 低 | 中等 | 高 |
| 41-52 | 1 | 1 | 2 |
| 53-59 | 1 | 2 | 3 |
| 60-68 | 2 | 3 | 4 |
| 69-77 | 3 | 4 | 5 |
| 78-88 | 4 | 5 | 6 |
| 89-100 | 5 | 6 | 7 |
| 101-116 | 6 | 7 | 8 |
| 117-125 | 7 | 8 | 9 |
| 131-147 | 8 | 9 | |
| 148-166 | 9 | | |

配件

· 踝罩 · 鞋拔子 · 消音袜 · 止动限位块

完整的脚板编号

FS1-00-0 A -

脚芯

级别 01-09 尺寸 22-31 普通分趾或人字分趾
RU-普通分趾
SR-人字分趾右脚
SL-人字分趾左脚

完整的脚套型号

FTC- - 4-

脚套

第2或第3代 高度 M-正常 H-高帮 踝罩 0-有 1-无 尺寸 22-31 厘米 颜色 L-浅肤色 M-肤色 D-黑色 分趾 R-普通分趾 L-人字分趾 L-左脚 R-右脚

与我们联系



宝泰欧 (北京) 假肢矫形器商业有限责任公司

地址: 北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层

电话: 010 6547 6760

传真: 010 6547 6769

网址: www.proteor.com.cn

