



顺畅 灵活 可靠 耐用






无与伦比的性能

RUSH 脚板能够满足那些既想在行走中体会到舒适和顺畅，又能自信地进行所有运动的高活动水平患者。

为了满足不同年龄和不同残肢长度的患者需求，RUSH 系列提供了 9 种脚板款式。

每天如散步，远足，网球，篮球，水上运动，极限运动，RUSH 脚板均可以帮助您无限地实现！

RUSH 系列采用独特的玻纤复合材料制成，兼具灵活性和耐久性，适合任何活动水平的患者。

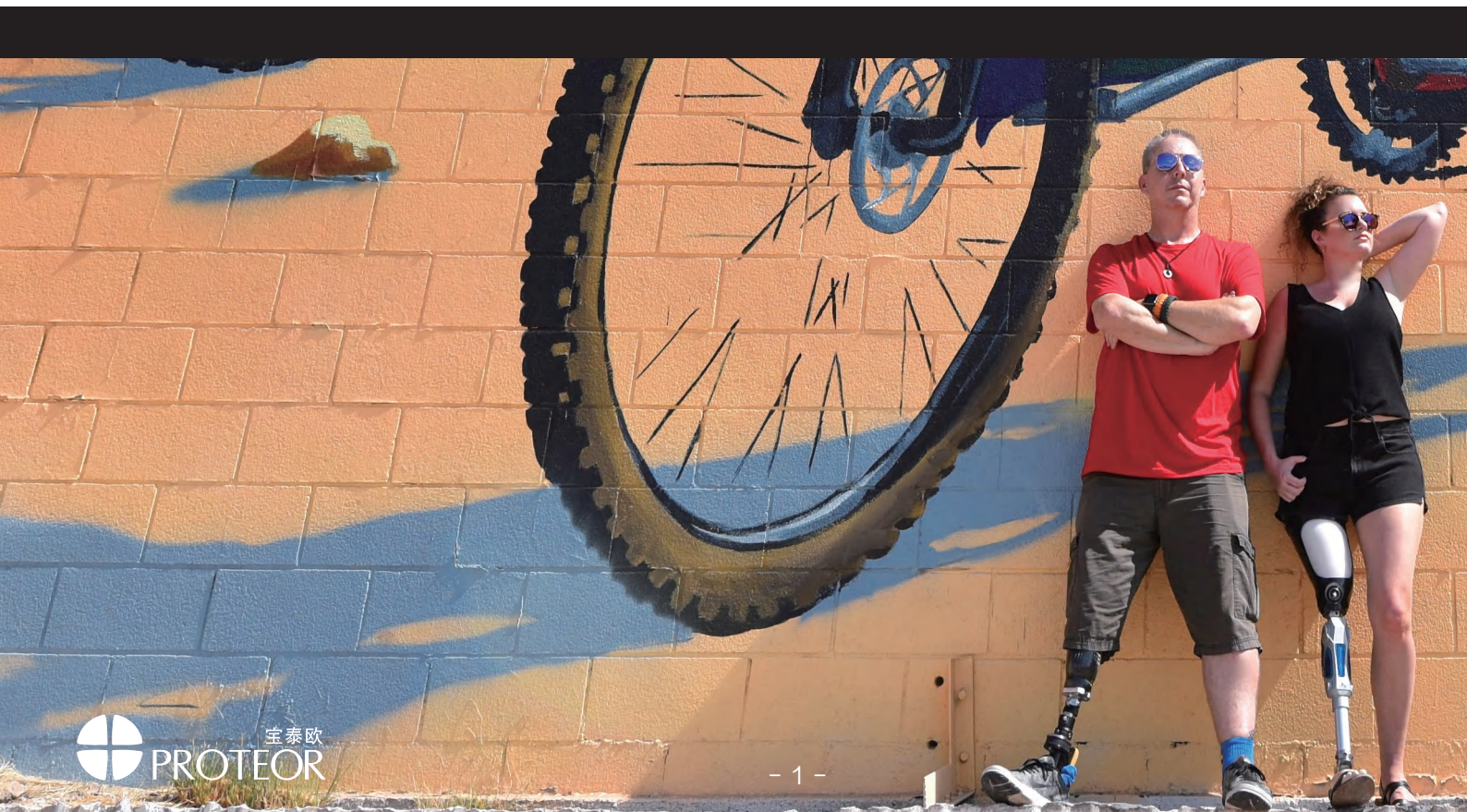

 第 4 页	 第 5 页
 第 6 页	 第 8 页
 第 9 页	 第 10 页
 第 11 页	 第 12 页

新型动态材料：

用于航空航天工业领域的玻璃纤维

- 灵活耐用
- 仿生性地滚动步态
- 高耐久性

创新设计：

具有专利曲线的脚板设计

- 与地面连续接触
- 脚部渐进自然翻滚
- 提高稳定性

防水：

- 脚板和连接件符合耐水标准
- 耐淡水、海水和氯化水
- 可进水（如游泳等水上运动）

* 2018 年由宝泰欧集团收购。

* 自 2011 年入市以来已售出超过 35000 个脚板。

* 总返修率低于 0.6%。





图 ①-②：龙骨抗疲劳测试 >300万次；脚板能量反馈测试 >82%；粘接合格周期测试 >300万次。

图 ②：可以看出复合玻纤材料的超强柔韧性和抗压性，普通碳纤脚板变形到这种程度一定会发生断裂。

这就是 RUSH 系列脚板为何可以适应任何激烈运动并具有超常的耐久性。

图 ③：虽然 RUSH 系列脚板没有分趾设计，但可以看出仍然具有良好的内外翻功能。

图 ④：RUSH 系列脚板可适应各种崎岖不平的路况。

图 ⑤：可选择防水系列。

图 ⑥-⑧：RUSH 系列脚板可适应各种剧烈的体育运动、极限运动。

RUSH ROGUE



良好的功能性、极佳的舒适度、踝关节万向功能

RUSH ROGUE® 提供最仿生和最动态的脚板和踝关节运动。踝关节的设计用来缓解高负荷冲击，使患者轻松完成各种极限运动的同时将脚板的功能发挥到极限。脚板是由先进的玻璃纤维复合材料制成的，比大多数传统的假肢脚灵活三倍。优秀的滚动特性提供了特殊的能量反馈，把功能性和舒适性结合到极致，患者能够在各种运动及极端地形中将脚板功能发挥到极致。

- 踝关节设计，用于垂直减震和吸收竖向冲击。
- 平滑地滚动，在任何情况下都可以获得高能量反馈并且舒适性极佳。
- 良好的踝关节万向功能及仿生性使患者具有极好的步态，令人很难发现你穿戴了假肢。
- 极端的可靠性和耐久性可以令你适应极端的运动及环境。
- 踝关节的万向及缓冲功能，可以减轻对膝关节，臀部和背部的冲击。

* 产品参数

最大承重	165 公斤	跟高	10 毫米	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	质保期	36 个月	22-24 厘米	165 毫米
脚皮颜色	肤色和黑色			25-27 厘米	178 毫米
重 量	1155 克			28-29 厘米	181 毫米

* 产品重量基于尺寸 26 厘米的脚板（包括消音袜和脚套）

* 结构高度基于尺寸 23 厘米，26 厘米，或 29 厘米的脚板（包括消音袜、脚套和 10 毫米的跟高）

* 体重、活动等级对应脚板级别参考

体重 (公斤)	0-48	49-64	65-79	80-95	96-111	112-127	128-143	144-159	160-165
低活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中等活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
剧烈运动	2	3	4	5	6	7	8	9	-





无与伦比的性能

RUSH RAMPAGE 脚板是最新研发上市的，进一步丰富了 RUSH 产品系列。

该脚板在保留原有 RUSH 系列脚板滚动平顺、自然这个特点的同时，增加了舒适性，提高了全地形适应能力。并创造了一款新的，更有利于关注外观的患者的选择，同时降低了产品的整体重量。RAMPAGE 脚板为追求美观和高性能完美结合的患者提供了最完美的解决方案，它具备了全系 RUSH 产品高性能的特质，同时外观更优于其他脚板。

RAMPAGE – 值得你体验！

- 满足你的审美喜好。
- 整体产品重量降低。
- 平滑滚动及无与伦比的能量反馈。
- 仿生性踝关节运动模拟自然步态。
- 在任何环境中使用的极致可靠性。

* 产品参数

最大承重	165 公斤	跟高	10 毫米	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	质保期	36 个月	22-24 厘米	168 毫米
脚皮颜色	肤色和黑色			25-27 厘米	181 毫米
重 量	850 克			28-29 厘米	184 毫米

* 产品重量基于尺寸 26 厘米的脚板（包括消音袜和脚套）

* 结构高度基于尺寸 23 厘米，26 厘米，或 29 厘米的脚板（包括消音袜、脚套和 10 毫米的跟高）

* 体重、活动等级对应脚板级别参考

体重 (公斤)	0-48	49-64	65-79	80-95	96-111	112-127	128-143	144-159	160-165
低活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中等活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
剧烈运动	2	3	4	5	6	7	8	9	-



你能体验到的创新

RUSH RAMPAGE-LP 脚板具有灵活性强、能量反馈迅速、滚动平滑的特点。结构高度较低，是那些结构高度受限的长残肢患者的极佳选择。

该脚板将舒适性、功能性和耐久性完美的融合在一起。

* 产品参数

最大承重	165 公斤	跟高	10 毫米	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	质保期	36 个月	22-24 厘米	114 毫米
脚皮颜色	肤色和黑色			25-27 厘米	121 毫米
重 量	805 克			28-29 厘米	121 毫米

* 产品重量基于尺寸 26 厘米的脚板（包括消音袜和脚套）

* 结构高度基于尺寸 23 厘米，26 厘米，或 29 厘米的脚板（包括消音袜、脚套和 10 毫米的跟高）

* 体重、活动等级对应脚板级别参考

体重 (公斤)	0-48	49-64	65-79	80-95	96-111	112-127	128-143	144-159	160-165
低活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中等活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高活动水平	2	3	4	5	6	7	8	9	-
剧烈运动	3	4	5	6	7	8	9	-	-

RUSH^{FOOT}_{H2O}

COLLECTION



无与伦比的抓地力、不需要脚皮

RUSH H2O 系列是防水型脚板系列，是淋浴或进行各种水上运动活动的理想脚板。防水系列涵盖了 ROGUE、RAMPAGE、RAMPAGE-LP、HiPro 这四款脚板，也就是说这四款脚板即可选择普通型，也可以选择防水型。

脚板底部具有集成的 Vibram 鞋底，前部由定制成型的橡胶包裹，从而有强大的抓地力，并且不需要穿戴脚皮。RUSH H2O 系列提供同样可靠的耐用性和舒适性，并且在光滑的地面上有极高的稳定性和防滑功能。从淋浴到游泳池这些光滑的地面，你不会找到其他比这款脚板更好的抓地力及安全感来提高你的自信心。

* HiPro H2O 产品参数

最大承重	165 公斤	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	22-24 厘米	152 毫米
脚皮颜色		25-27 厘米	159 毫米
重 量	765 克	28-29 厘米	175 毫米
质保期	36 个月		

* RAMPAGE-LP H2O 产品参数

最大承重	165 公斤	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	22-24 厘米	105 毫米
脚皮颜色		25-27 厘米	105 毫米
重 量	650 克	28-29 厘米	111 毫米
质保期	36 个月		

* RAMPAGE H2O 产品参数

最大承重	165 公斤	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	22-24 厘米	159 毫米
脚皮颜色		25-27 厘米	165 毫米
重 量	695 克	28-29 厘米	178 毫米
质保期	36 个月		

* ROGUE H2O 产品参数

最大承重	165 公斤	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	22-24 厘米	152 毫米
脚皮颜色		25-27 厘米	159 毫米
重 量	1000 克	28-29 厘米	175 毫米
质保期	36 个月		

* 体重、活动等级对应脚板级别参考

体重 (公斤)	0-48	49-64	65-79	80-95	96-111	112-127	128-143	144-159	160-165
低活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中等活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高活动水平	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)	8 (9)	9 (-)
剧烈运动	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)	8 (9)	9 (-)	- (-)

* 产品重量基于尺寸 26 厘米的脚板（包括消音袜和脚套）

* 结构高度基于尺寸 23 厘米，26 厘米，或 29 厘米的脚板（包括消音袜、脚套和 10 毫米的跟高）

注：() 红色的级别为 RAMPAGE-LP 脚板参考级别



简单、有效、高效

RUSH Foot EVAQ8 系列是将一个专门设计的真空系统，和所有 RUSH 脚板的足跟部缓冲块融合在一起，橡胶管与接受腔连接，患者走路的同时接受腔形成负压，从而解决了悬吊问题。

RUSH Foot EVAQ8 系列的设计初衷是以最简单的方法解决接受腔悬吊问题，患者只需几步快速的行走便可产生最大的真空效率。该系统不需要电池或复杂的机械泵。

与其他同类产品不同的是，通过这种极其简单、美观的集成设计，便可以达到 22 毫米汞柱的负压，这种设计和负压效果可以有效提高残肢和接受腔的连接效果，使步态更稳定，患者舒适度明显改善。

RUSH Foot EVAQ8 系统可适应任何路况，并且防水（淡水或盐水）。结构简洁，轻便，基本不需要额外的维护。

RUSH Foot EVAQ8 系统集成在 RAMPAGE、RAMPAGE-LP、HiPro 和 ROGUE 脚板上，为所有寻求提升接受腔真空悬吊的患者提供了完美的选择。

去任何地方，做任何事。

RUSH Foot EVAQ8 系列帮助你提升生活品质。

* ROGUE EVAQ8 产品参数

最大承重	165 公斤	跟 高	10 毫米	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	质保期	36 个月	22-24 厘米	165 毫米
脚皮颜色	肤色和黑色			25-27 厘米	178 毫米
重 量	1165 克			28-29 厘米	181 毫米

* HiPro EVAQ8 产品参数

最大承重	165 公斤	跟 高	10 毫米	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	质保期	36 个月	22-24 厘米	165 毫米
脚皮颜色	肤色和黑色			25-27 厘米	178 毫米
重 量	930 克			28-29 厘米	181 毫米

* RAMPAGE-LP EVAQ8 产品参数

最大承重	165 公斤	跟 高	10 毫米	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	质保期	36 个月	22-24 厘米	114 毫米
脚皮颜色	肤色和黑色			25-27 厘米	121 毫米
重 量	815 克			28-29 厘米	121 毫米

* RAMPAGE EVAQ8 产品参数

最大承重	165 公斤	跟 高	10 毫米	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-29 厘米	质保期	36 个月	22-24 厘米	168 毫米
脚皮颜色	肤色和黑色			25-27 厘米	181 毫米
重 量	860 克			28-29 厘米	184 毫米

* 体重、活动等级对应脚板级别参考

体重 (公斤)	0-48	49-64	65-79	80-95	96-111	112-127	128-143	144-159	160-165
低活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中等活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高活动水平	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)	8 (9)	9 (-)
剧烈运动	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)	8 (9)	9 (-)	- (-)

* 产品重量基于尺寸 26 厘米的脚板（包括消音袜和脚套）

* 结构高度基于尺寸 23 厘米，26 厘米，或 29 厘米的脚板（包括消音袜、脚套和 10 毫米的跟高）

注：（-）红色的级别为 RAMPAGE LP 脚板参考级别

RUSH ROVER



全地形控制

RUSH ROVER 具有超低的结构高度，并且拥有 RUSH 脚板系列共有的灵活性和耐用性。结构高度仅 5.4 厘米，拥有与其它同系列脚板一样的柔和滚动，一样的仿生性能，同时是最结实、耐用的超低结构高度脚板。



* 产品参数

最大承重	165 公斤	跟高	10 毫米	脚板尺寸	结构高度
脚板尺寸	22-30 厘米	质保期	36 个月	22-24 厘米	54 毫米
脚皮颜色	肤色和黑色			25-27 厘米	60 毫米
重 量	950 克			28-30 厘米	64 毫米



* 产品重量基于尺寸 26 厘米的脚板（包括消音袜和脚套）

* 结构高度基于尺寸 23 厘米，26 厘米，或 29 厘米的脚板（包括消音袜、脚套和 10 毫米的跟高）

* 体重、活动等级对应脚板级别参考

体重 (公斤)	0-48	49-64	65-79	80-95	96-111	112-127	128-143	144-159	160-165
低活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中等活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
剧烈运动	2	3	4	5	6	7	8	9	-



全新的儿童脚板

众所周知，为儿童选择一款合适的脚板绝非易事；不过我们已经为你找到了解决办法！就是这款具有超低结构高度的 RUSH Kid。

全新的 RUSH Kid 脚板具有 RUSH 脚板系列共有的灵活性和耐用性，结构高度仅 5.1 厘米。拥有与其它同系列脚板一样的柔和滚动，一样的动态响应，同时是最结实、耐用的儿童脚板。



* 产品参数

最大承重	61 公斤	跟高	10 毫米
脚板尺寸	19-21 厘米	质保期	18 个月
脚皮颜色	肤色和黑色	结构高度	51 毫米
重量	505 克		

* 产品重量基于尺寸 20 厘米的脚板（包括消音袜和脚套）

* 结构高度基于尺寸或 20 厘米的脚板（包括消音袜、脚套和 10 毫米的跟高）

* 体重、活动等级对应脚板级别参考

体重 (公斤)	0-14	15-20	21-27	28-34	35-41	42-48	49-54	55-61
低活动水平	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P
中等活动水平	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P
高活动水平	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P
剧烈运动	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	-



RUSH Chopart®

坚不可摧的高强度、高耐久性

RUSH Chopart 是专门为肖伯特、塞姆，皮罗果夫，和部分足部截肢者设计的。这种动态足底板的设计，提供了更高的稳定性和可靠性，并消除了普通碳纤肖伯特足底板常见的分层、断裂现象。该脚板采用独特的玻纤复合材料，比碳纤材料更柔韧，易弯曲，因此比市场同类产品更灵活和耐用。



* 产品参数

最大承重	61 公斤	跟高	10 毫米
脚板尺寸	22-30 厘米	质保期	24 个月
脚皮颜色	肤色和黑色	结构高度	29 毫米
重 量	380 克		

* 产品重量基于尺寸 26 厘米的脚板（包括消音袜和脚套）

* 结构高度基于尺寸 26 厘米的脚板（包括消音袜、脚套和 10 毫米的跟高）



* 体重、活动等级对应脚板级别参考

体重 (公斤)	0-48	49-64	65-79	80-95	96-111	112-127	128-143	144-159	160-165
低活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中等活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高活动水平	1	2	3	4	5	6	7	8	9
剧烈运动	2	3	4	5	6	7	8	9	-

定制 - 为了患者获得最佳的产品体验

为了提供给患者最佳的产品满意度，RUSH 系列每款脚板都可以为患者提供定制服务。需要提供的具体定制信息如下：

患者信息

- 年龄
- 性别
- 体重
- 脚号（尺寸）
- 残肢状况
- 残肢长度
- 活动水平

脚板信息

- 脚板款式
- 强度等级
- 结构高度
- 脚板尺寸
- 脚套颜色
- 之前所穿脚板的信息（如有）



患者常见问题解答

● RUSH 脚板没有碳纤脚板结实？

- 不、正好相反！ RUSH 系列采用的独特玻纤复合材料，兼具灵活性和耐久性，适合任何活动水平的患者。测试证明……基本上无法损坏。另外舒适度更高……

● 为什么 RUSH 脚板没有分趾？

- 玻纤复合材料允许扭转和内 / 外翻。因此 RUSH 脚板不需要脚板分趾设计照样可以提供良好的内 / 外翻功能。

内 / 外翻测试：对脚板施加 125Kg 的压力。内 / 外翻 $> 8^{\circ}$ 。

● 穿 RUSH 脚板可以从事什么样的运动、活动？

- 基本上没有任何限制。但是患者应该根据自己的活动水平和运动目标选好脚板的硬度级别

冲击级别	可从事活动种类
低	行走、园艺、购物……
中	慢跑、爬山、高尔夫、滑雪……
高	竞速跑、网球、羽毛球
极高	足球、篮球等激烈运动、极限运动

● 我穿 RUSH 脚板可以进行水上运动吗？

- 游泳、海滩、冲浪……无所不能。

● 哪些患者适合穿 RUSH 脚板？

- 由于 RUSH 提供多种脚板款式和不同的硬度，所有的大腿和小腿截肢者都可以穿戴 RUSH 产品。

于此同时，RUSH 也可以为由于体重较大、活动水平极高或对脚板的竖向冲击很大的患者提供定制服务。