


假肢矫形器材料  
2023年

# ● 真空成型接受腔

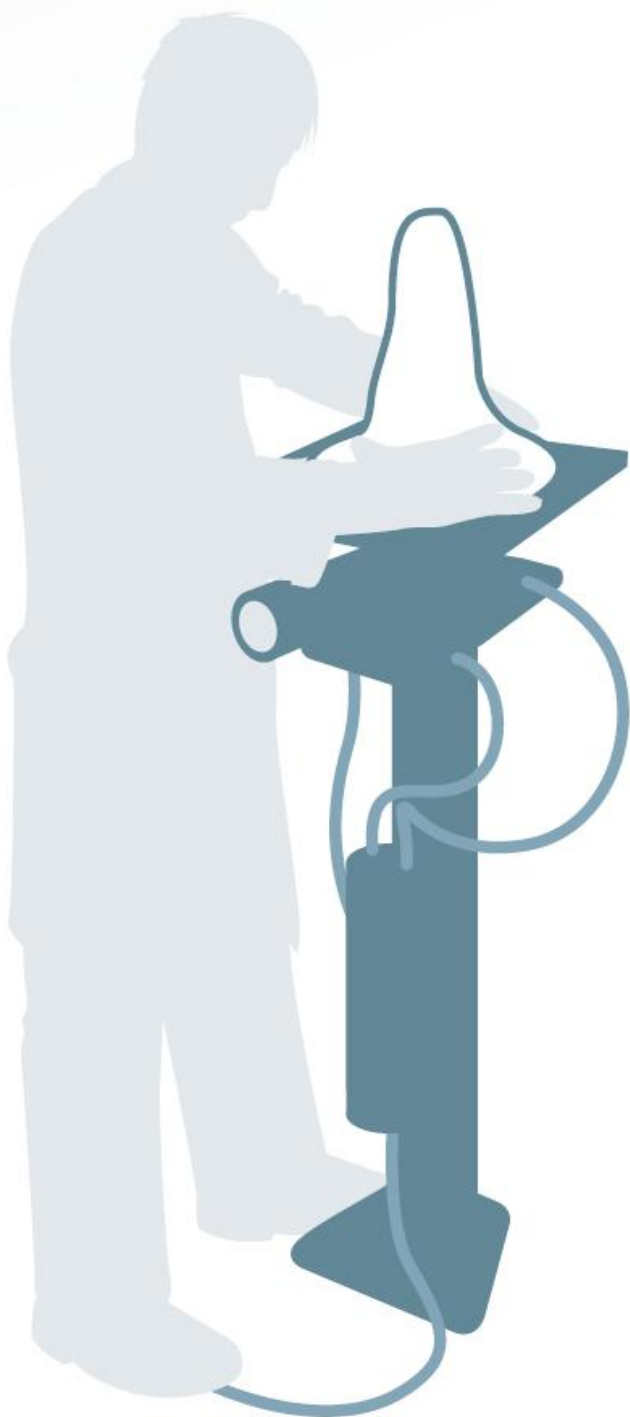

| 接受腔种类 | 材料        | 型号          | 单位                 |
|-------|-----------|-------------|--------------------|
| 织物成型  | - 树脂      | PC239-5     | 4.5Kg              |
|       | - 固化剂     | PC233-R     | 150g               |
|       | - PVA膜    | PL030       | 22m                |
|       | - PVA套    | PL030-1     | 10个                |
|       | - 贝仑 + 玻纤 | TV130/TV140 | 1Kg                |
|       | - 贝仑      | TP100       | 2Kg                |
|       | - 聚酰胺材料   | TJ020       | 25m                |
|       | - 超薄纱套    | TT011       | 25m                |
|       | - 涤纶粘     | TF012       | 3.1m               |
| 碳纤成型  | - 碳纤硬树脂   | PC239-5     | 4.5Kg              |
|       | - 碳纤套     | TC009       | 1m                 |
|       | - 碳纤布     | TC031       | 1.25m <sup>2</sup> |

# 树脂

| 产品名称              | 产品说明                                                                                                  | 型号      | 固化剂配比率       | 包装     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|
| 碳纤硬树脂<br>PROACRYL | <ul style="list-style-type: none"><li>- 用于硬性抽真空与碳纤套增强抽真空</li><li>- 强度高、重量轻</li><li>- 对皮肤无刺激</li></ul> | PC239-5 | 3% (PC233-R) | 4.5 Kg |



# 固化剂

| 产品名称            | 产品说明                                                                                                                           | 型号      | 包装    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 固化剂<br>PROACRYL | <ul style="list-style-type: none"><li>- 树脂或快干胶固化必需品</li><li>- 固化时间：在温度20° C条件下约20分钟</li><li>- 每100克树脂或快干胶加3%固化剂，均匀搅拌</li></ul> | PC233-R | 150 g |



# 颜色糊


| 产品名称 | 产品说明                                                                                           | 型号    | 包装    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 颜色糊  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 与树脂或快干胶一起使用</li><li>- 每100克树脂或快干胶加3%固化剂，均匀搅拌</li></ul> | PC178 | 150 g |




Human First

# PVA膜

| 产品名称  | 产品说明                                                  | 型号    | 规格                                    |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| PVA 膜 | 良好抗拉力、弹性达450%<br>易于焊接<br>特别适合与丙烯酸树脂PROACRYL和PROCARB使用 | PL030 | 长度：22米<br>宽度：1m<br>厚度：0.08mm<br>包装：1卷 |

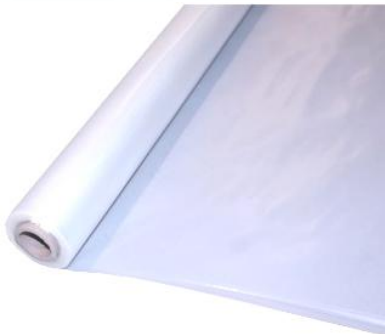

# PVA 袋

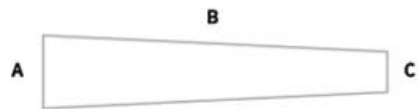

| 产品名称  | 产品说明                                                      | 型号      | A     | B     | C    | 规格                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|---------------------------|
| PVA 袋 | 良好抗拉力、弹性好<br><br>易于焊接<br><br>特别适合与丙烯酸树脂PROACRYL和PROCARB使用 | PL030-6 | 400mm | 900mm | 50mm | 厚度：0.08mm<br><br>包装：一包10个 |
|       |                                                           | PL030-5 | 110mm | 900mm | 50mm |                           |
|       |                                                           | PL030-4 | 150mm | 900mm | 50mm |                           |
|       |                                                           | PL030-3 | 200mm | 900mm | 50mm |                           |
|       |                                                           | PL030-2 | 250mm | 900mm | 50mm |                           |
|       |                                                           | PL030-1 | 300mm | 900mm | 50mm |                           |
|       |                                                           | PL030-0 | 350mm | 900mm | 50mm |                           |



# 真空成型材料：织物、增强材料

| 产品名称    | 产品说明                   | 型号    | 宽度    | 规格      |
|---------|------------------------|-------|-------|---------|
| 贝仑 + 玻纤 | 由75%聚酰胺（贝仑）+ 25%玻纤混织构成 | TV130 | 80mm  | 重量：1 Kg |
|         |                        | TV131 | 120mm |         |
|         |                        | TV134 | 140mm |         |
|         |                        | TV132 | 160mm |         |
|         |                        | TV133 | 200mm |         |

| 产品名称 | 产品说明            | 型号    | 宽度    | 规格      |
|------|-----------------|-------|-------|---------|
| 贝仑   | PERLON® 100% 贝仑 | TP100 | 80mm  | 重量：1 Kg |
|      |                 | TP101 | 100mm |         |
|      |                 | TP102 | 120mm |         |
|      |                 | TP103 | 150mm |         |
|      |                 | TP104 | 200mm |         |

| 产品名称  | 产品说明     | 型号    | 宽度    | 规格   |
|-------|----------|-------|-------|------|
| 聚酰胺材料 | 100 %聚酰胺 | TJ020 | 200mm | 2 Kg |





# 真空成型材料： 织物、增强材料


| 产品名称           | 产品说明                       | 型号       | 重量  | 宽度   |
|----------------|----------------------------|----------|-----|------|
| 玻璃/聚酰胺<br>强化北仑 | - 成型过程中保护石膏型，<br>并有局部增强之功效 | TV140-9  | 1Kg | 90mm |
|                |                            | TV140-12 |     | 12mm |
|                |                            | TV140-14 |     | 14mm |
|                |                            | TV140-16 |     | 16mm |
|                |                            | TV140-19 |     | 19mm |
|                |                            | TV140-21 |     | 21mm |



| 产品名称 | 产品说明                                            | 型号    | 宽度   | 长度  |
|------|-------------------------------------------------|-------|------|-----|
| 超薄纱套 | - 100 %聚酰胺，弹力好<br>- 尤其适用于成型的最内和最外层<br>- 成型后表面光滑 | TT011 | 40mm | 25m |



| 产品名称 | 产品说明       | 型号    | 厚度    | 宽度 | 长度  |
|------|------------|-------|-------|----|-----|
| 涤纶粘  | - 使接受腔内壁光滑 | TF012 | 3.5mm | 1m | 25m |

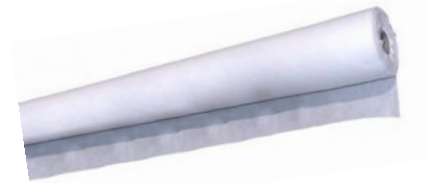

# 真空成型材料：碳纤维材料

\* 当纤维呈45° 时

| 产品名称 | 产品说明                  | 型号           | 长度 | 围长      | 直径*       |
|------|-----------------------|--------------|----|---------|-----------|
| 碳纤维套 | 用于制作碳纤接受腔：密、轻、结实、易于成型 | TC009-8065=2 | 2m | 65-80cm | 21-25.5cm |
|      |                       | TC009-8065=5 | 5m |         |           |
|      | 两股纤维纺织呈45° 人字形        | TC009-6550=2 | 2m | 50-65cm | 16-21cm   |
|      |                       | TC009-6550=5 | 5m |         |           |
|      | 与宝泰欧专用碳纤树脂PROCARB一起使用 | TC009-5035=2 | 2m | 35-50cm | 11-16cm   |
|      |                       | TC009-5035=5 | 5m |         |           |
|      |                       | TC009-3520=2 | 2m | 20-35cm | 6.3-11cm  |
|      |                       | TC009-3520=5 | 5m |         |           |



| 产品名称 | 产品说明                                             | 型号       | 长度 | 密度                  | 宽度    |
|------|--------------------------------------------------|----------|----|---------------------|-------|
| 碳纤维布 | 双向碳纤维织物。重量：285g/m <sup>2</sup> 。用于树脂成型时需要增加强度的部位 | TC031=01 | 1m | 285g/m <sup>2</sup> | 1.25m |





# 热塑板材系列



热塑  
板材



# 硬性聚乙板

| 产品编号      | 产品说明                                                                                        | 厚度   | 颜色 | 长度 | 宽度 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
| PL13102-L | 硬性聚乙板（PE）有良好的生物适应性、机械特性及可塑性。使用寿命长、持久耐用，特别适合制作脊柱侧弯矫形器或需要良好刚度的矫形器。热成型后收缩率低。可以用花纸装饰。加热温度170° C | 2mm  | 白色 | 2m | 1m |
| PL13103-L |                                                                                             | 3mm  |    |    |    |
| PL13105-L |                                                                                             | 5mm  |    |    |    |
| PL13106-L |                                                                                             | 6mm  |    |    |    |
| PL13108-L |                                                                                             | 8mm  |    |    |    |
| PL13110-L |                                                                                             | 10mm |    |    |    |
| PL13112-L |                                                                                             | 12mm |    |    |    |

# 柔性聚乙烯板

| 产品编号      | 产品说明                                                                                | 厚度   | 颜色 | 长度   | 宽度   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|
| PL12001-L | 柔性聚乙烯: 这种材料为病人提供支撑性和舒适性。特别适用于老年人、婴幼儿及术后矫形器适配。可以用花纸装饰。1mm的厚度特别适合制作舌状物。加热温度120>170° C | 1mm  | 白色 | 2m   | 1m   |
| PL12002-L |                                                                                     | 2mm  |    |      |      |
| PL12003-L |                                                                                     | 3mm  |    |      |      |
| PL12004-L |                                                                                     | 4mm  |    |      |      |
| PL12005-L |                                                                                     | 5mm  |    |      |      |
| PL12312-L |                                                                                     | 12mm |    | 0.5m | 0.5m |



# 聚丙烯

| 产品编号      | 产品说明                                                            | 厚度   | 颜色 | 长度 | 宽度 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
| PL14003-L | 聚丙烯材料本身集硬度和弹性于一体。抗冲击力和反复扭力，易于操作、高度抗磨损。可以用花纸装饰。<br>加热温度T° 190° C | 3mm  | 白色 | 2m | 1m |
| PL14004-L |                                                                 | 4mm  |    |    |    |
| PL14005-L |                                                                 | 5mm  |    |    |    |
| PL14012-L |                                                                 | 12mm |    |    |    |



# 柔性热塑板材

| 产品编号      | 产品说明                                                              | 硬度 | 厚度   | 颜色 | 长度   | 宽度   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|------|----|------|------|
| PL13606-S | 这种共聚物提供了灵活性和舒适性。需要外部刚性插座。热的时候可以很容易地成型。加热温度T° 150° C。特别适合制作接受腔内软腔。 | 软  | 6mm  | 白色 | 0.4m | 0.4m |
| PL13609-S |                                                                   | 软  | 9mm  |    |      |      |
| PL13612-S |                                                                   | 软  | 12mm |    |      |      |
| PL14612-S |                                                                   | 特软 | 12mm |    |      |      |
| PL14615-S |                                                                   | 特软 | 15mm |    |      |      |




# 低温板

| 产品编号    | 产品说明                                                    | 厚度    |    | 长度    | 宽度    |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|----|-------|-------|
| PL16016 | 制作上下肢矫形器，微孔, 易于成型。与病人患处形状高度匹配，粘接性能良好，重量轻。加热温度120>170° C | 1.6mm | 蓝色 | 600mm | 420mm |
| PL16020 |                                                         | 2mm   | 蓝色 |       |       |
| PL16130 |                                                         | 3mm   | 肤色 |       |       |



# ● 热塑板材接受腔

| 接受腔种类 | 材料           | 型号                            | 厚度                  | 加热温度       | 密度                    |
|-------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 临时腔   | 聚丙烯板材        | PL14012                       | 12mm                | 180-200° C | 1.11g/cm <sup>3</sup> |
| 双层腔   | - EVA 柔性热塑板材 | PL13612<br>PL13609<br>PL14612 | 12mm<br>9mm<br>12mm | 150°C      | 0.93g/cm <sup>3</sup> |

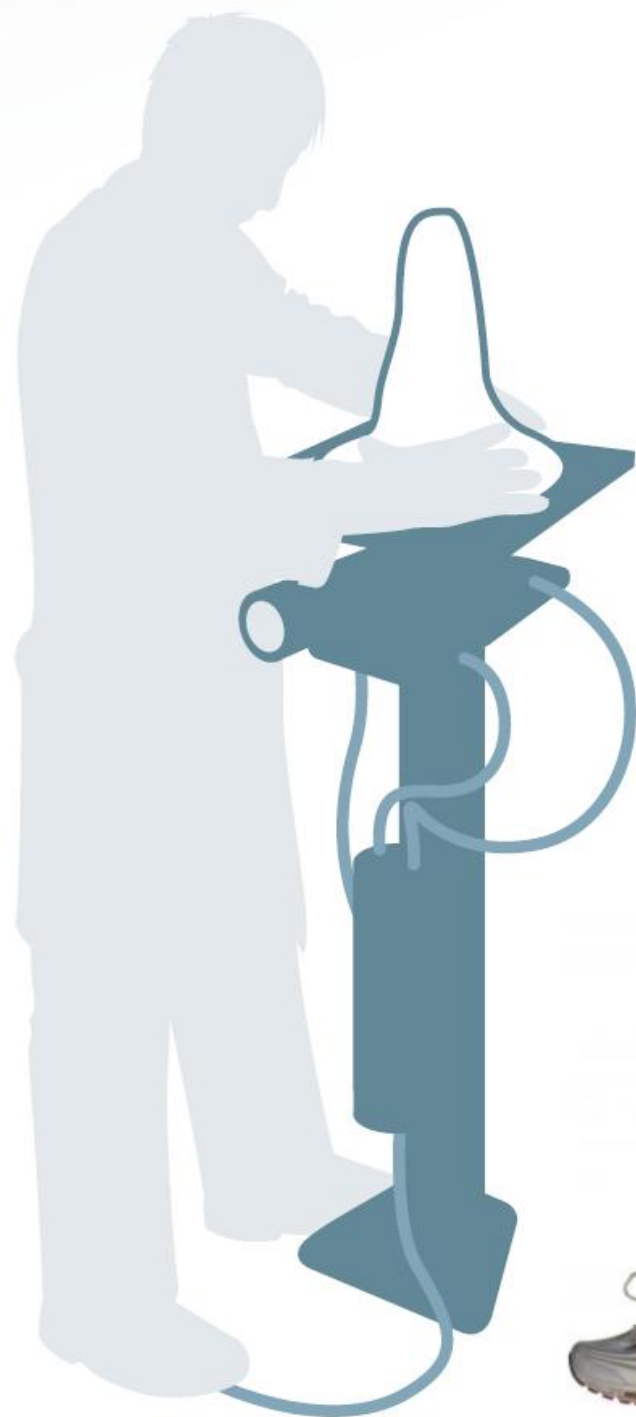



# 接受腔板材：PETG 共聚酯、聚丙烯板、柔性板材

| 产品名称 | 产品说明                                                                                                                                      | 型号        | 厚度   | 宽度 | 长度 | 加热温度       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|----|------------|
| 聚丙烯板 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 适合于制作临时接受腔</li> <li>- 集硬度和弹性于一体</li> <li>- 抗冲击力和反复扭力</li> <li>- 易于操作</li> <li>- 高度抗磨损</li> </ul> |           |      | 1m | 2m | 180-200° C |
|      |                                                                                                                                           | PL14012-L | 12mm |    |    |            |



| 产品名称    | 产品说明                                                                                                | 型号        | 硬度 | 厚度   | 宽度    | 长度    | 加热温度   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------|-------|-------|--------|
| EVA柔性板材 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 特别适合于制作内接受腔</li> <li>- 非常耐用</li> <li>- 具有弹性和舒适性</li> </ul> | PL13612-S | 软  | 12mm | 400mm | 400mm | 150° C |
|         |                                                                                                     | PL13609-S |    | 9mm  |       |       |        |
|         |                                                                                                     | PL14612-S | 超软 | 12mm |       |       |        |



## 下肢矫形器板材



| 矫形器种类     | 材料                       | 产品编号               | 厚度         |
|-----------|--------------------------|--------------------|------------|
| AFO / 行走靴 | 聚丙烯板 (PP)                | PL14003            | 3mm        |
| 夜用靴       | 硬性聚乙烯板 (PE)              | PL13103<br>PL13104 | 3mm<br>4mm |
| 膝关节矫形器    | 聚丙烯聚乙烯混合板<br>硬性聚乙烯板 (PE) | PL13104<br>PL14004 | 4mm<br>4mm |
| KAFO      | 聚丙烯板 (PP)                | PL14004            | 4mm        |



## 上肢矫形器塑料板材



| 矫形器种类 | 材料          | 产品编号               | 厚度           |
|-------|-------------|--------------------|--------------|
| 肘矫形器  | 硬性聚乙烯板 (PE) | PL13103            | 3mm          |
| 指头矫形器 | 低温板         | PL16016<br>PL16020 | 1.6mm<br>2mm |
| 手腕矫形器 | 低温板         | PL16232            | 3.2mm        |



# 脊柱侧弯矫形器塑料板材



| 矫形器种类          | 材料              | 产品编号               | 厚度         |
|----------------|-----------------|--------------------|------------|
| 里昂矫形器<br>三点力矫正 | Orthochoc（巧克力板） | PL17204            | 4mm        |
| CTM<br>密尔沃基    | 硬性聚乙烯板（PE）      | PL13104<br>PL13105 | 4mm<br>5mm |

# 脊柱支撑支具



| 矫形器种类  | 材料         | 产品编号                                                | 厚度                              |
|--------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 颈托     | 硬性聚乙烯板（PE） | PL13103<br>PL13104<br>PL13105                       | 3mm<br>4mm<br>5mm               |
| 柔性脊柱支具 | 柔性聚乙板（PE）  | PL12001<br>PL12002<br>PL12003<br>PL12004<br>PL12005 | 1mm<br>2mm<br>3mm<br>4mm<br>5mm |
| 硬性脊柱支具 | 硬性聚乙烯板（PE） | PL13104<br>PL13105                                  | 4mm<br>5mm                      |





## 坐姿椅板材

| 矫形器种类 | 材料             | 产品编号    | 厚度   |
|-------|----------------|---------|------|
| 坐姿椅   | 硬性聚乙烯板<br>(PE) | PL13106 | 6mm  |
|       |                | PL13108 | 8mm  |
|       |                | PL13110 | 10mm |



## 站立架支具板材

| 矫形器种类 | 材料             | 产品编号    | 厚度   |
|-------|----------------|---------|------|
| 站立架   | 硬性聚乙烯板<br>(PE) | PL13106 | 6mm  |
|       |                | PL13108 | 8mm  |
|       |                | PL13110 | 10mm |





# 内衬泡沫板系列





# PLASTAZOTE®聚乙烯泡沫内衬板

| 产品编号    | 产品说明                                                                      | 厚度   | 长度 | 宽度 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| PL88003 | 矫形器内衬的必备产品。易于制作，能够与任何复杂形状阳型相吻合。密度33 kg/m <sup>3</sup> 。可在170° C下热成型。颜色：蓝色 | 3mm  | 2m | 1m |
| PL88005 |                                                                           | 5mm  |    |    |
| PL88007 |                                                                           | 7mm  |    |    |
| PL88010 |                                                                           | 10mm |    |    |

## TEPEFOAM:PE+EVA泡沫

| 产品编号    | 产品说明                                                                     | 颜色 | 厚度   | 长度 | 宽度 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|
| EL05905 | 中等硬度闭孔PE+EVA泡沫板。易于加工。完美匹配最复杂的模具形状。-密度160 kg/m <sup>3</sup> 。可在140° C下热成型 | 白色 | 5mm  | 1m | 1m |
| EL05910 |                                                                          | 白色 | 10mm |    |    |
| EL06107 |                                                                          | 肤色 | 7mm  |    |    |

## POLYTECH: PE + EVA FOAM泡沫板

| 产品编号     | 产品说明                                                               | 颜色 | 厚度   | 长度 | 宽度 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|
| PL500-05 | 聚四氟乙烯：闭孔泡沫。易于加工。完美匹配最复杂的模具形状。密度110 kg/m <sup>3</sup> 。可在170° C下热成型 | 银色 | 5mm  | 1m | 2m |
| PL500-07 |                                                                    | 银色 | 7mm  |    |    |
| PL500-10 |                                                                    | 银色 | 10mm |    |    |

# 记忆型泡沫板

| 产品编号  | 产品说明                                                                                   | 厚度   | 长度    | 宽度    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| EL093 | 记忆型泡沫板：舒适、减震，它可以吸收冲击并避免压力点。即使在承受巨大压力后，它也会恢复到最初的形状。其强大的粘合能力粘合剂设计用于粘合许多表面，如塑料、木材、金属、纸板等。 | 10mm | 610mm | 410mm |




## 高密度泡沫：PE+EVA泡沫

| 产品编号   | 产品说明                                                                     | 厚度  | 长度    | 宽度    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| PL4D16 | 高密度泡沫：PE+EVA泡沫-制作标签特别方便。易于加工。完美匹配最复杂的模具形状。穿孔材料。密度400 kg/m3。可在130° C下热成型。 | 2mm | 850mm | 850mm |



## EVA大理石图案内衬板

| 产品编号             | 产品说明                                                                      | 厚度  | 长度   | 宽度    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| PL52002-01/02/03 | 用于矫形器内侧免压；舒适、漂亮、卫生。闭孔泡沫。轻盈舒适，耐磨损。非常适合矫形器修整。长寿命产品。密度240 kg/m3。可在80° C下热成型。 | 2mm | 2.1m | 1.05m |

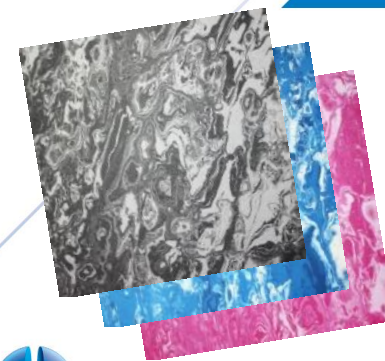

## 热成型3D 织物

| 产品编号                          | 产品说明                                                                                   | 厚度  | 长度    | 宽度 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|
| TT501 黑<br>TT503 蓝<br>TT507 绿 | 热成型3D织物: 透气质感吸湿面料。非常舒适, 摸起来很柔软。易于清洁, 可在40° C下清洗。良好的抗老化性能。这种织物无胶水, 减少了过敏风险。可在170° C下热成型 | 6mm | 1.45m | 1m |



## 3D织物

| 产品编号               | 产品说明                                                                     | 厚度  | 长度    | 宽度 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|
| TT381 黑<br>TT383 蓝 | 3D织物-透气质感吸湿面料。-非常舒适, 摸起来很柔软。-易于清洁, 可在40° C下清洗。-良好的抗老化性-这种织物无胶水, 减少了过敏风险。 | 6mm | 1.45m | 1m |



# 鹿皮绒面内衬板

| 产品编号  | 产品说明                                                     | 厚度    | 长度 | 宽度    |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| TT600 | 集强度与柔软的表面手感于一体。非常舒适的接触，触感柔软灵活。易于清洁，可在40° C以下清洗。良好的抗老化性能。 | 4.5mm | 1m | 1.45m |



# 自粘内衬织物

| 产品编号  | 产品说明                                                 | 厚度    | 长度 | 宽度   |
|-------|------------------------------------------------------|-------|----|------|
| TT410 | 用于包覆矫形器的内外侧，提高矫形器整体档次，非常舒适、手感柔软。具有强力粘合剂的织物。良好的抗老化性能。 | 1.5mm | 1m | 1.5m |



# 防滑内衬

| 产品编号  | 产品说明                                                         | 厚度  | 长度   | 宽度   |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| TT450 | 特别适用于矫形器闭合带的内衬。这种共聚物对患者皮肤提供了最佳的附着力，背面可以用钩子固定。消除摩擦点。易于用水和肥皂清洗 | 6mm | 0.3m | 0.3m |



PROTEOR

Human First




## 氯丁橡胶板材

| 产品编号  | 产品说明                                                        | 厚度  | 长度    | 宽度    |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| TT460 | 特别适用于矫形器和塑料制品的内衬。氯丁橡胶板材的一面是聚酯织物，背面可以用钩子固定。易于清洁，可在40° C以下清洗。 | 5mm | 0.99m | 1.45m |



## 防水可伸展面料

| 产品编号  | 产品说明                                        | 厚度    | 长度 | 宽度    |
|-------|---------------------------------------------|-------|----|-------|
| TT372 | 特别适合制作防水罩。延展性（双向拉伸）。卓越的机械强度。易于清洁，可在40° C下清洗 | 2.5mm | 1m | 1.45m |

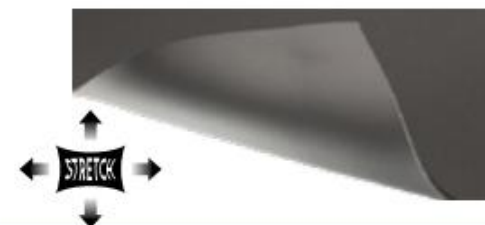

## 自粘碳纤图案乙烯基

| 矫形器种类                | 产品说明                                                                                                                                        | 产品编号  | 长度 | 宽度    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| “碳纤维”<br>外观自粘乙<br>烯基 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 建议用于矫形器，使得矫形器外表显得更加美观现代</li><li>• 可以贴在任何材料表面上，以获得“碳纤维”外观，耐用，易于使用（用热风枪）。粘合面可立即粘合，24小时后效果最佳</li></ul> | TH001 | 1m | 1.52m |








## 弹性丝绒包边带

| 产品编号       | 产品说明                                                | 颜色 | 长度  | 宽度   |
|------------|-----------------------------------------------------|----|-----|------|
| TT020-BLEU | 用于各种形状边缘的包覆，缝线或胶粘固定。手感柔软、舒适，避免形状边缘与皮肤的摩擦。可以缝合或粘在塑料上 | 蓝色 | 25m | 25mm |
| TT020-N    |                                                     | 黑色 |     |      |



## 加热成型套

| 产品编号    | 产品说明                                 | 颜色 | 长度   | 直径   |
|---------|--------------------------------------|----|------|------|
| PL02408 | 热缩护套（x10）：用于矫形器支条。允许垂直内衬。可使用热风枪使其收缩。 | 黑色 | 1.2m | 19mm |
| PL02407 |                                      | 蓝色 |      |      |

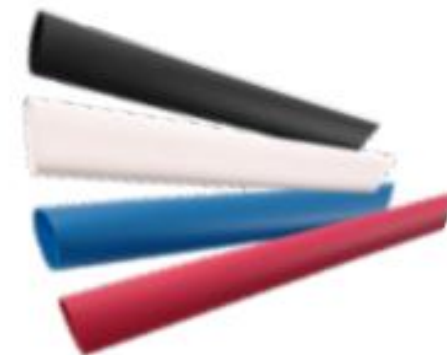

# 尼龙搭扣和免压垫



TEXTURED

## PROTEOR LOGO

PROTEOR marking available for signaled colors; replace CC by CM when ordering reference



## MARKING

100 pieces minimum in same size and color. Please, contact us to get an estimate, from

| Pack. | SELF-GRIPPING STRAP     |              |              |              |              |              | PVC PAD    |            |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|       | Length                  | 300 mm       |              | 500 mm       | 400 mm       | 680 mm       | 150 mm     |            |
|       | Strap Width             | 16 mm        | 25 mm        |              | 40 mm        |              | 16 / 25 mm | 25 / 40 mm |
| x 10  | Texas                   | 2X79-CV300R  | 2X49-CV300R  | 2X49-CV500R  | 2X59-CV400R  | 2X59-CV680R  | 2X89       | 2X69       |
| x 100 | <i>Texas marked</i>     | 2X79-CC300R  | 2X49-CC300R  | 2X49-CC500R  | 2X59-CC400R  | 2X59-CC680R  |            |            |
| x 10  | Sevilla                 | 2X709-CV300R | 2X409-CV300R | 2X409-CV500R | 2X509-CV400R | 2X509-CV680R | 2X805      | 2X605      |
| x 100 | <i>Sevilla marked</i>   | 2X709-CC300R | 2X409-CC300R | 2X409-CC500R | 2X509-CC400R | 2X509-CC680R |            |            |
| x 10  | Sydney                  | 2X701-CV300R | 2X401-CV300R | 2X401-CV500R | 2X501-CV400R | 2X501-CV680R | 2X801      | 2X601      |
| x 10  | New Dehli               | 2X702-CV300R | 2X402-CV300R | 2X402-CV500R | 2X502-CV400R | 2X502-CV680R | 2X802      | 2X602      |
| x 10  | Tokyo                   | 2X70-CV300R  | 2X40-CV300R  | 2X40-CV500R  | 2X50-CV400R  | 2X50-CV680R  | 2X85       | 2X65       |
| x 100 | <i>Tokyo marked</i>     | 2X70-CC300R  | 2X40-CC300R  | 2X40-CC500R  | 2X50-CC400R  | 2X50-CC680R  |            |            |
| x 10  | Alaska                  | 2X75-CV300R  | 2X45-CV300R  | 2X45-CV500R  | 2X55-CV400R  | 2X55-CV680R  | 2X81       | 2X61       |
| x 10  | Moscou                  | 2X713-CV300R | 2X413-CV300R | 2X413-CV500R | 2X513-CV400R | 2X513-CV680R | 2X818      | 2X618      |
| x 10  | Oslo                    | 2X719-CV300R | 2X419-CV300R | 2X419-CV500R | 2X519-CV400R | 2X519-CV680R | 2X83       | 2X63       |
| x 100 | <i>Oslo Marked</i>      | 2X719-CC300R | 2X419-CC300R | 2X419-CC500R | 2X519-CC400R | 2X519-CC680R |            |            |
| x 10  | Shanghai                | 2X721-CV300R | 2X421-CV300R | 2X421-CV500R | 2X521-CV400R | 2X521-CV680R | 2X809      | 2X609      |
| x 100 | <i>Shanghai marked</i>  | 2X721-CC300R | 2X421-CC300R | 2X421-CC500R | 2X521-CC400R | 2X521-CC680R |            |            |
| x 10  | Auckland                | 2X714-CV300R | 2X414-CV300R | 2X414-CV500R | 2X514-CV400R | 2X514-CV680R | 2X819      | 2X619      |
| x 100 | <i>Auckland marked</i>  | 2X714-CC300R | 2X414-CC300R | 2X414-CC500R | 2X514-CC400R | 2X514-CC680R |            |            |
| x 10  | Amsterdam               | 2X708-CV300R | 2X408-CV300R | 2X408-CV500R | 2X508-CV400R | 2X508-CV680R | 2X808      | 2X608      |
| x 100 | <i>Amsterdam marked</i> | 2X708-CC300R | 2X408-CC300R | 2X408-CC500R | 2X508-CC400R | 2X508-CC680R |            |            |
| x 10  | Lima                    | 2X71-CV300R  | 2X41-CV300R  | 2X41-CV500R  | 2X51-CV400R  | 2X51-CV680R  |            |            |
| x 100 | <i>Lima marked</i>      | 2X71-CC300R  | 2X41-CC300R  | 2X41-CC500R  | 2X51-CC400R  | 2X51-CC680R  |            |            |
| x 10  | London                  | 2X77-CV300R  | 2X47-CV300R  | 2X47-CV500R  | 2X57-CV400R  | 2X57-CV680R  |            |            |

COLORED



良好耐拉伸性。易于制作, 易于清洗, 耐用

 **PROTEOR**

*Human First*




# 花纸

产品规格：- 长度：5m/卷 - 颜色清晰 - 亮丽 - 可反复使用（至少3次）




BALLONS NOIRS 500 x ±160 cm XX100-SF

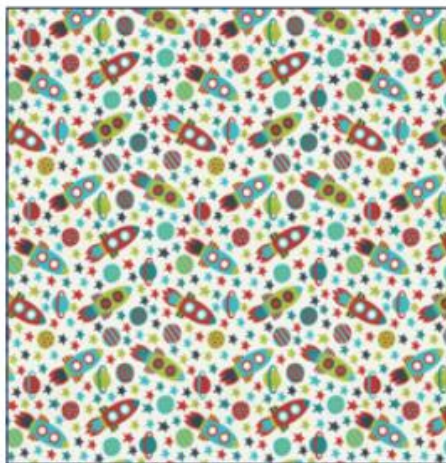

FUSEES 500 x ±160 cm XX100-SC




PETITS MONSTRES 500 x ±160 cm XX100-SD

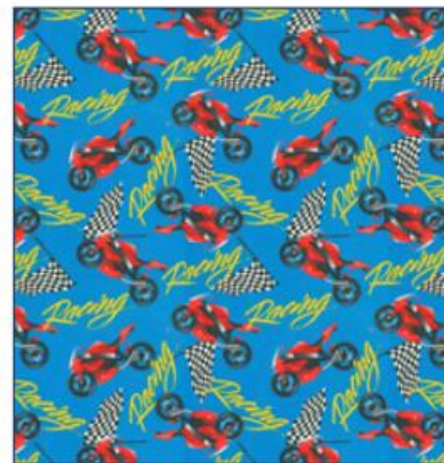

COURSE DE MOTO 500 x ±160 cm XX100-SA




JOLIES SIRENES 500 x ±160 cm XX100-SE

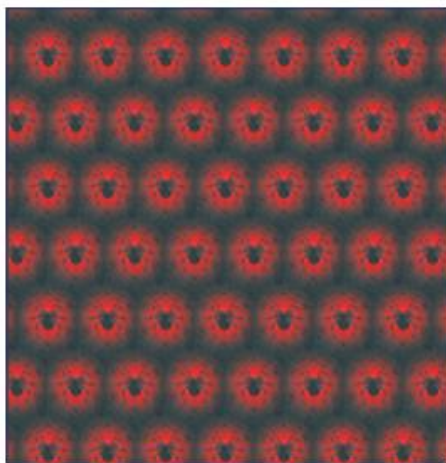

RED SPIDER 500 x ±160 cm XX100-SB



PEACE&LOVE 500 x ±160 cm XX100-JF

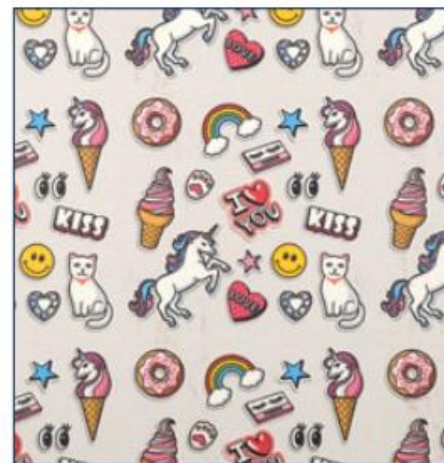

UNICORN 500 x ±160 cm XX100-RF



# 花纸

产品规格：- 长度：5m/卷    - 颜色清晰    - 亮丽    - 可反复使用（至少3次）



FEERIE    500 x ±160 cm    XX100-PB



FUNNY OWLS    500 x ±160 cm    XX100-PJ



CHEVAL    500 x ±160 cm    XX100-OA



URBAN    500 x ±160 cm    XX100-PF




WHITE WIZARDS    500 x ±160 cm    XX100-RG



COMICS 2    500 x ±160 cm    XX100-RC



BLUE FLOWERS    500 x ±160 cm    XX100-RE

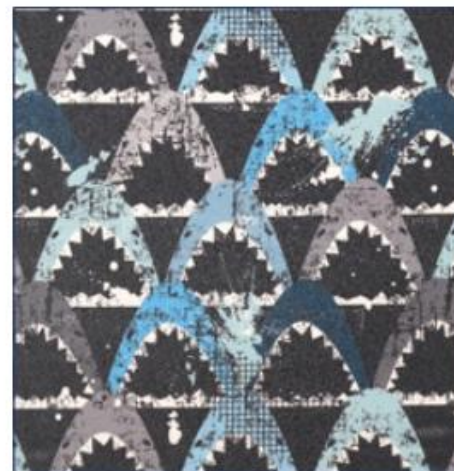

BLUE SHARK    500 x ±160 cm    XX100-RJ




# 花纸


产品规格：- 长度：5m/卷 - 颜色清晰 - 亮丽 - 可反复使用（至少3次）



GREY BLUE 500 x ±160 cm XX100-RL

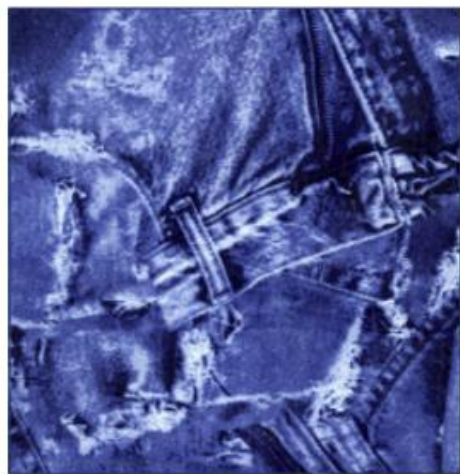


JEANS POCES 500 x ±160 cm XX100-LC

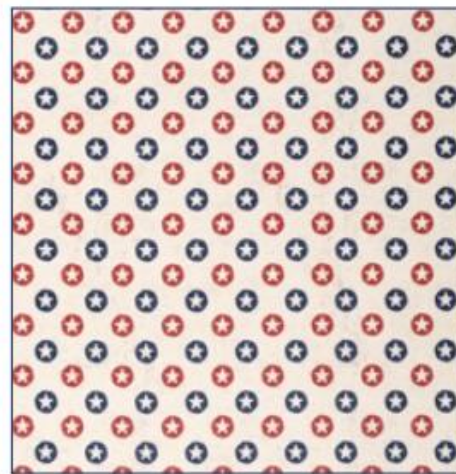

STARS 6 500 x ±160 cm XX100-RI



USA 500 x ±160 cm XX100-MJ

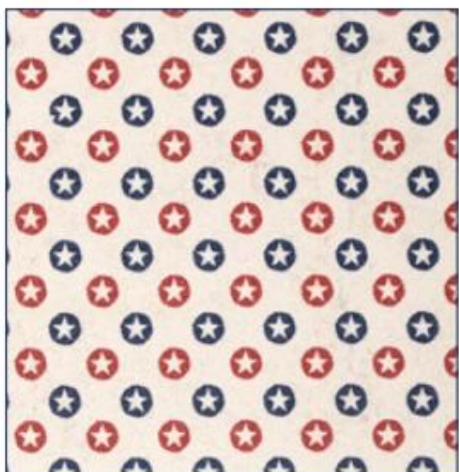

STARS 500 x ±160 cm XX100-PI



DREAMCATCHER 500 x ±160 cm XX100-QC



SNOWBOARD 500 x ±160 cm XX100-RH



FLOWER POWER 500 x ±160 cm XX100-MP



# 花纸


产品规格： - 长度：5m/卷    - 颜色清晰    - 亮丽    - 可反复使用（至少3次）



CARBONE    500 x ±160 cm    XX100-NA




JEANS'S POCHE2    500 x ±160 cm    XX100-MA

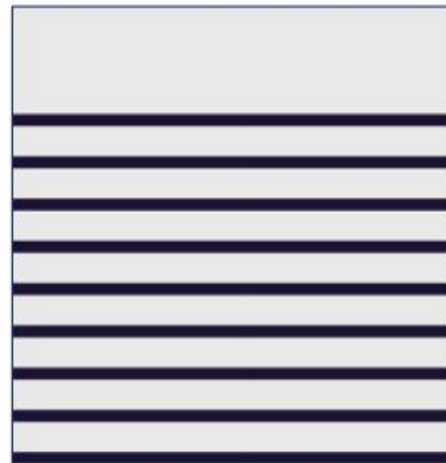


MARINIÈRE    500 x ±160 cm    XX100-B1



PULLOVER    500 x ±160 cm    XX100-PH

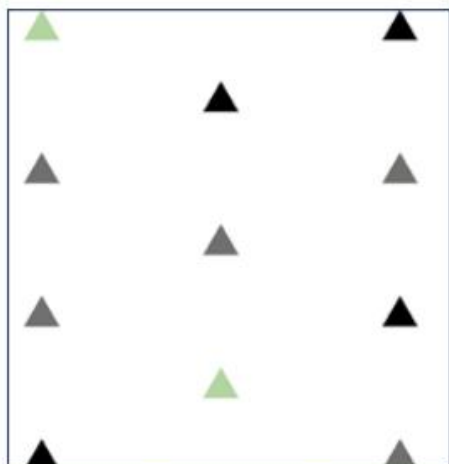

TRIANGLES    500 x ±160 cm    XX100-QD

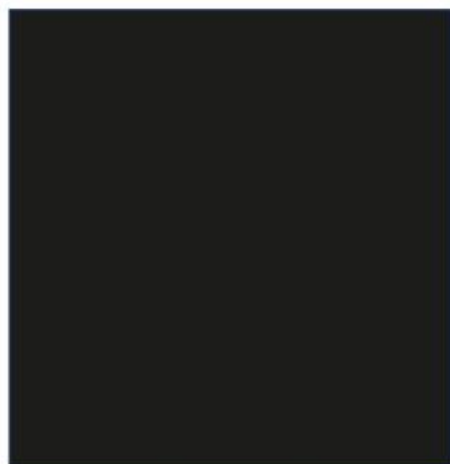

UNI NOIR    500 x ±160 cm    XX100-LQ



BEIGE UNI    500 x ±160 cm    XX100-LR



BOIS    500 x ±160 cm    XX100-OE


# 花纸



|           |               |          |
|-----------|---------------|----------|
| HERO MASK | 500 x ±160 cm | XX100-RA |
|-----------|---------------|----------|



|           |               |          |
|-----------|---------------|----------|
| CUTE DOGS | 500 x ±160 cm | XX100-RD |
|-----------|---------------|----------|

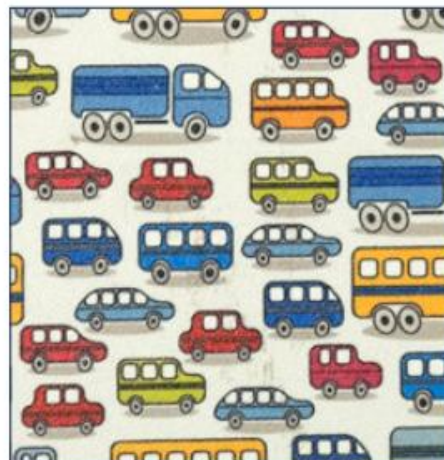

|        |               |          |
|--------|---------------|----------|
| CARS 3 | 500 x ±160 cm | XX100-RB |
|--------|---------------|----------|



|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| ZANIMAUX | 500 x ±160 cm | XX100-PL |
|----------|---------------|----------|



|           |               |          |
|-----------|---------------|----------|
| ESCARGOTS | 500 x ±160 cm | XX100-JG |
|-----------|---------------|----------|



|           |               |          |
|-----------|---------------|----------|
| DANSEUSES | 500 x ±160 cm | XX100-QB |
|-----------|---------------|----------|